

Brugervejledning

# FJERNBETJENING RC-N

**bernafon**   
Your hearing • Our passion



Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening.  
Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater.



Før RC-N fjernbetjeningen tages i brug, bør du læse hele denne brugervejledning. Den indeholder instruktioner og vigtig information om RC-N fjernbetjeningen samt retningslinjer for sikkerhed.

# Indholdsfortegnelse

Generelle advarsler	6
Indledning	14
RC-N oversigt	15
Sådan isættes og udskiftes batterierne	16
Betjening sammen med dine høreapparater	20
Statuslys	21
Sådan justeres lydstyrken	22
Sådan sættes høreapparatet på lydløs tilstand	23
Sådan skiftes program	25
Lås/lås RC-N fjernbetjeningens knapper op	26

Sådan bruges strophullet	29
Vedligeholdelse	30
Brugerinformation vedr. enhedens radiokommunikationsdel	31
International garanti	36


## Generelle advarsler

Du bør være fuldt bekendt med de generelle advarsler, før du tager RC-N fjernbetjeningen i brug.

### **Advarsler**

- ⚠ RC-N er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, der kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Særlig opmærksomhed bør rettes mod de mindre dele. Hvis en del sluges, skal du omgående søge lægehjælp.

- ⚠ Udsæt aldrig RC-N for kraftig varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den i en varm bil parkeret i solen. Der er en risiko for, at den kan eksplodere og forårsage alvorlig skade.
  
- ⚠ RC-N bør ikke anvendes ombord på et fly uden specifik tilladelse fra flypersonalet.
  
- ⚠ Brugere anbefales at følge samme retningslinjer som producenter af icd-enhed og pacemaker anbefaler vedrørende brugen af mobiltelefoner. Hvis du har et aktivt implantat, skal RC-N fjernbetjeningen holdes mindst 15 cm fra implantatet.

 RC-N fjernbetjeningen indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. RC-N fjernbetjeningen er ikke testet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at fjernbetjeningen ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare.



⚠ Rengøring anbefales på regelmæssig basis med en tør eller let fugtig klud uden opløsningsmidler. RC-N fjernbetjeningen må ikke udsættes for eller rengøres med rengøringsmidler eller nogen form for alkohol. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave-lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge din fjernbetjening. Du bør altid fjerne din fjernbetjening, før du anvender disse produkter og give produktet tid til at tørre, før du bruger RC-N fjernbetjeningen. Nedsæk ikke fjernbetjeningen i vand eller andre væsker.

- ⚠ Hvis du anvender en håndledsrem, skal du sørge for, at den er designet og egnet til dette formål. Brug aldrig en nakkestrop på grund af risikoen for kvælning.
- ⚠ Brug ikke fjernbetjeningen under røntgen, CT-, MR- og PET-scanning, elektroterapi eller operation.
- ⚠ Brug af RC-N fjernbetjeningen under kørsel kan distrahere dig. Hvis kørselsforhold eller trafikregler kræver det, skal du holde ind til siden og parkere, før du bruger fjernbetjeningen.

- ⚠ Brug altid batterier anbefalet af din høreapparat-specialist. Batterier af dårlig kvalitet kan være utætte og forårsage skader. Et opbrugt batteri skal fjernes så hurtigt som muligt.
- ⚠ Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Bortskaf aldrig batterier ved at brænde dem. Der er risiko for, at de kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

- ⚠ Hjælp med at beskytte miljøet ved ikke at smide fjernbetjeningens batterier i det usorterede husholdningsaffald. Aflever batterierne på genbrugsstationen eller giv dem til din høreapparat-specialist, der kan bortskaffe dem.
- ⚠ RC-N anvender digitale signaler til at transmittere kommandoer til høreapparatet. Selvom det er højst usandsynligt, har der været rejst mistanke om, at dette signal kan forstyrre medicinske apparater, såsom pacemakere. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, anbefaler vi brugere af pacemaker at undlade at bære og bruge fjernbetjeningen i brystlommer eller om halsen.

⚠ Fjernbetjeningens sendestyrke ligger under de internationale emissionsgrænser for eksponering, der er tilladt for mennesker. Til sammenligning er fjernbetjeningens stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra hårtørrere, elektriske barbermaskiner osv. RC-N fjernbetjeningen opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

# Indledning

Nedenstående dele er inkluderet i din RC-N kasse og vil blive beskrevet i denne brugervejledning:



RC-N fjernbetjening  
Model: RC-2B

AAAA batterier




Brugervejledning



# RC-N oversigt

- 1 Volumen op
- 2 Volumen ned
- 3 Programskift
- 4 Statuslys
- 5 Batteridæksel
- 6 Fingregreb
- 7 Huller til halssnor

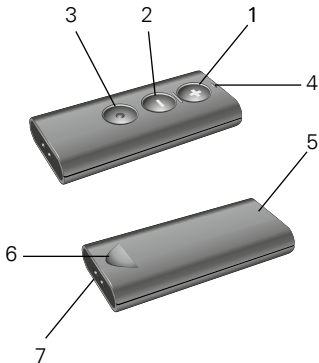





## Sådan isættes og udskiftes batterierne

RC-N fjernbetjeningen bruger to Alkaline AAAA batterier. Isæt nye batterier ifølge nedenstående anvisninger.

### **Sådan fjernes batteridækslet**



1. Tryk ned på fingergrebet med tommelfingeren.
2. Skub batteridækslet i retningen som vist på illustrationen.
3. Tag batteridækslet helt af.
4. Sæt batterierne i batteriskuffen og sørg for, de er korrekt placeret i begge ender.



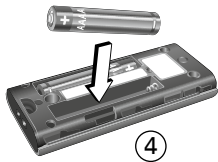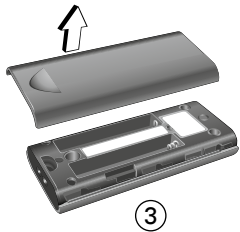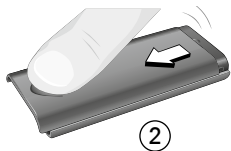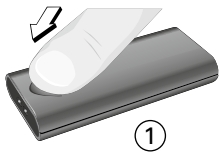

## Sådan sættes batteridækslet på igen

1. Anbring batteridækslet ca. 6 mm fra toppen af fjernbetjeningen.
2. Skub batteridækslet som vist, indtil der lyder et klik.

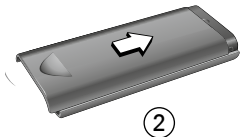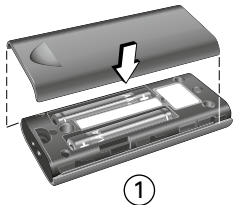

**i** Batteridækslet må aldrig tvinges op eller i. Hvis det er nødvendigt at bruge kraft til at lukke dækslet, skal du flytte det en smule, så det klikker nemt på plads. Batteriets levetid varierer afhængigt af anvendelsen.


# Betjening sammen med dine høreapparater

Dit høreapparat kan betjenes med RC-N fjernbetjeningen fra en afstand på op til 1 meter.

## Anbefalet brug




Håndholdt

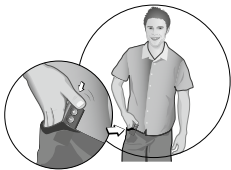


I lommen

# Statuslys

Betjening af RC-N fjernbetjeningen	Statuslyset viser, at fjernbetjeningen er i drift. Det vil blinke en gang efter hvert tryk på en knap.	
Lavt batteriniveau	Statuslyset vil blinke langsomt (hvert 2. sekund), når batterierne skal udskiftes.	
RC-N fjernbetjeningens knapper er låste	Statuslyset vil blinke 3 gange, når fjernbetjeningens knapper er låste.	


## Sådan justeres lydstyrken

Du kan justere høreapparaternes lydstyrke med fjernbetjeningens volumen op og volumen ned knapper.

Sådan øges lydstyrken	Tryk på volumen op knappen for at øge lydstyrken i dine høreapparater.	
Sådan dæmpes lydstyrken	Tryk på volumen ned knappen for at dæmpe lydstyrken i dine høreapparater.	

## Sådan sættes høreapparatet på lydløs tilstand

Med RC-N kan du sætte dit høreapparat på lydløs tilstand ved at benytte volumen ned knappen.


Sæt høreapparatet på lydløs tilstand	Tryk og hold volumen ned knappen inde i 2 – 3 sekunder. Statuslyset vil slukke, når høreapparatet er på lydløs tilstand.	
Vend tilbage til normal indstilling	Tryk på en vilkårlig knap på høreapparatet for at vende tilbage til normal indstilling.	

**i** Høreapparatets lydløse tilstand slukker ikke for høreapparatet. Læs venligst i høreapparatets brugervejledning for information om, hvordan høreapparatet slukkes.



## Sådan skiftes program

Med RC-N fjernbetjeningens knap til programskift kan du bladre gennem høreapparaternes programmer.

<p>Programvalg- eller skift</p>	<p>Tryk på knappen til programskift for at bladre gennem høreapparatets programmer. Hver gang der trykkes på knappen til programskift, skiftes der til det næste program.</p>	 An illustration of a hand with the index finger pressing the bottom button of a vertical remote control. The remote control has three buttons: a top button with a plus sign (+), a middle button with a minus sign (-), and a bottom button with a circle symbol. The hand is shown in a light gray color with motion lines indicating the pressing action.
-------------------------------------	---	--

## Lås/lås RC-N fjernbetjeningens knapper op

For at undgå ved et uheld at trykke på fjernbetjeningens knapper, mens den ligger i din lomme, kan du låse knapperne.

### **Sådan låses fjernbetjeningens knapper**

1. Tryk og hold volumen ned knappen og knappen til programskift inde samtidig i 3–4 sekunder.



2. Statuslyset vil blinke 2 gange, når knapperne er låste.

Tryk på en vilkårlig tast for at sikre dig, at knapperne er låste. Statuslyset vil blinke tre gange for at bekræfte (se side 21).

## **Sådan låses fjernbetjeningens knapper op**

1. Tryk og hold igen volumen ned knappen og knappen til programskift inde samtidig i 3–4 sekunder.
2. Statuslyset vil lyse konstant, indtil tasterne er låst op.

## Sådan bruges strophullet

RC-N fjernbetjeningen har et strophul, hvori der kan sættes en lille strop, så den er lettere at bære og passe på.

1. Tag batteridækslet af (se side 16 og 17).
2. Træk en lille strop gennem strophullerne.



## Vedligeholdelse

- Når der skiftes batteri, og når fjernbetjeningen rengøres, skal den holdes over en blød overflade, så den ikke går i stykker, hvis du ved et uheld taber den.
- Fjernbetjeningen bør på jævnlig basis rengøres med en tør eller let fugtig klud.
- Undgå at fjernbetjeningen bliver våd.

# Brugerinformation vedr. enhedens radiokommunikationsdel

## **USA og Canada**

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document.

### **This instrument is certified under:**

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.



These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

**Caution:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S erklærer hermed, at denne fjernbetjening er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Overensstemmelseserklæring fås her:

SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
[www.sbohearing.com](http://www.sbohearing.com)

## International garanti

RC-N fjernbetjeningen er omfattet af en begrænset garanti, der dækker materialedefekter og den håndværksmæssige udførelse.

Denne garanti falder bort, hvis RC-N er blevet repareret af uautoriseret servicepersonale.

Dato:

Model:

Garantiperiode:

Serienr.:

Høreapparatspecialist

# Noter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

143920/DK



## Producent

SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
[www.sbohearing.com](http://www.sbohearing.com)



0682



N1175



0000143920000001

**bernafon** 

*Your hearing • Our passion*